

ANATOMÍA PATOLÓGICA



pistola para jeringas

La pistola **CAMECO** se utiliza en punciones como, por ejemplo, mama, tiroides, bazo, hígado, etc. Facilita el aspirado y permite al médico disponer de una mano libre. Conjuntamente con la pistola se utilizan jeringas desechables que suministren un aspirado al vacío satisfactorio (en especial ONCE y B&D). El gran volumen de la jeringa de 20cc permite el vaciado de tumores císticos. La pistola **CAMECO** se utiliza para pruebas citológicas dentro de las siguientes áreas: hematología, cirugía, otorrinolaringología, oncología, ginecología, urología y radiología. Otros posibles usos de la pistola **CAMECO** son por ejemplo: lavado de corpúsculos de sangre marcados Cr con sal común en botellas de inyección, así como en el diagnóstico de infecciones de las vías urinarias por medio de la punción suprapúbica de vejiga, donde la vejiga desechable puede servir como medio de transporte.

El cambio de jeringa se hace rápida y fácilmente. Las aletas de la jeringa se presionan dentro de las ranuras de la pistola en una simple operación. La pistola **CAMECO** se produce para jeringas desechables de 10cc y 20cc en los tamaños de 10ml y 20ml respectivamente.

ref.: 20ml 391920

10ml 391938


Universal 391946

Guía france 302068

guía agujas

El producto es conocido mundialmente como guía de Franzén y se utiliza para la biopsia transrectal de próstata. La guía de acero inoxidable, tiene un adaptador regulable y un anillo para el dedo palpador. Para mayor comodidad puede ser doblada. Conjuntamente con el instrumento se suministra una aguja especial (0,60 x 207mm) que también se puede encargar por separado. Se recomienda la gama de agujas que a continuación se reseña:

MEDIDAS: (0,6 x 140) (0,6 x 90) (0,6 x 140) (0,6 x 207)

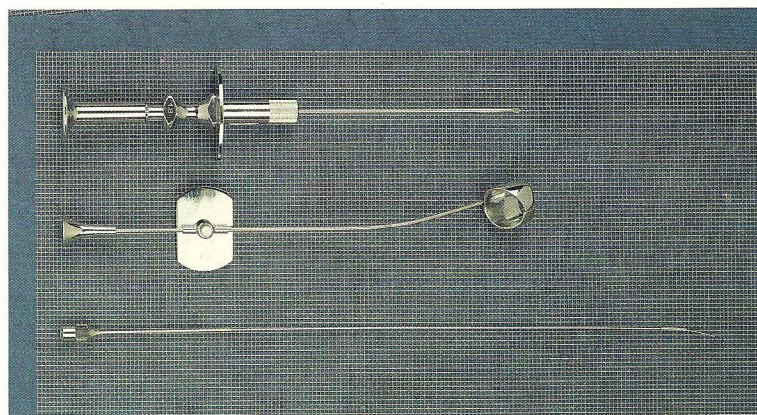

IMPORTADOR EXCLUSIVO:

cameco ab



Temaer Hospitalaria[®], s.a.

PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO

NUEVO DOMICILIO

P.I. El Cascajal - C/ Mirlos, 7, Nave A - 28320 PINTO, Madrid (ESPAÑA)
Teléf. 916 924 648 - Fax. 916 924 632